

残コルチゾールHP ― 操作マニュアル（0.1版）

2026年7月 / コルチゾール補充療法中のペース配分を“見える化”する自作ツール

「残コルチゾールHP」は、コルチゾール補充療法（ヒドロコルチゾン内服）を受けている人が、その日の「使える体力の残量」を把握し、活動のペース配分を自分で判断するための補助ツールです。体力をゲームのHP（ヒットポイント）に見立て、服薬で回復し、活動で消費する形で表します。

このツールの位置づけ（大切なこと）

- ・服薬量を決めるための道具ではありません。HP・mgの数値は相対的な目安です。
- ・服薬量やタイミングの変更、体調不良時の増量（sick day rules）は必ず主治医と相談してください。
- ・「HPが谷に沈む＝健康な人なら増量を考える場面」として、受診時の相談材料に使えます。

本マニュアルは、直近の更新で追加・変更された機能を中心にまとめた 0.1 版です。同じ ACTH 単独欠損症の患者さんにも使っていただけるよう整備を進めています。

開発の経緯 ―― なぜ、これを作ったか

私自身が、ACTH 単独欠損症（副腎皮質刺激ホルモンが十分にせず、体を守るコルチゾールが不足する希少な指定難病）の当事者です。このツールは、その日々の経験から生まれました。

長い間、確定した診断がつかないまま過ごしました。原因の分からない強い疲労や体調不良を抱えながら、それでも働き続けるほかなく、心身が限界に達し、日常生活そのものが立ち行かなくなる状態にまで至りました。適切な診断が遅れると、本人は「気のせい」「甘え」といった誤解の中で消耗し続けてしまいます。

診断がついた後も、心細さは続きました。この病気では、発熱や強いストレス時に不足を補う対応（シックデイ・ルール）や、緊急時の備え―ステロイドカードの携帯、いざという時の注射の準備とその使い方の案内―が命に関わります。しかし、そうした情報や備えが十分に整った形で得られるとは限らず、何をどう管理すればよいのか、手探りで日々をしのぐ場面が少なくありませんでした。

そして今も、この病気は身近な人にも理解されにくく、周囲の無理解の中で暮らしています。見た目には分かりにくい不調ゆえに、つらさが伝わらないことの孤独があります。

このツールに込めた願い

- ・自分の「使える体力」を目に見える形にして、無理をして倒れる前にペースを保てるようにしたい。
- ・受診時に、体調と服薬の記録を医師へ正確に伝えられるようにしたい。
- ・同じ病気の患者が、手探りではなく、安心して日常を送れる手がかりを持てるようにしたい。

これは誰かを責めるためのものではありません。希少な指定難病であるがゆえに、患者向けのガイダンスや緊急時対応の情報が、まだ十分に行き渡っていない―その隙間を、当事者同士で少しでも埋めていきたいという思いから作りました。

同じ病気を持つ仲間と支え合い、正しい知識とガイダンスを整え、誰もが安心して暮らせる日常を取り戻したい。そのための場（サークル）と、活動を支える助成を願っています。

※ 本ツールはあくまで生活の補助であり、医療行為に代わるものではありません。診断・治療・服薬に関わる判断は、必ず主治医のもとで行ってください。

1. メイン画面 —— HP・服薬・天候プリセット

アプリを開くと最初に出るのがメイン画面です。上部に現在のHP（残量）、その下に服薬ボタン、さらに天候別の「朝の初期値」プリセットが並びます。



メイン画面：HP残量・服薬ボタン・天候プリセット（雨天／曇／晴天）・新しい日

- HP バー：現在の残量。数値と色（青＝余裕／橙＝低下／赤＝枯渇ぎみ）で状態が分かります。
- 服薬ボタン：服用したらタップ。時刻・mg・回復量（+HP）が表示され、押すとHPが回復します。
- 朝の初期値（天候）：天候でその日の出だしのコルチゾール量が変わるため、雨天・曇・晴天をワンタップで切り替えられます。過去データに基づき 雨天=HP80／曇=HP175／晴天=HP277（括弧内は想定コルチゾール値）。
- 新しい日（リセット）：その日の記録を締めて翌日分に切り替えます（確認ダイアログあり／後述）。

2. このあとの見込み・健常者カーブ

メイン画面の下には、2つのグラフがあります。このアプリの核となる「谷（体力が沈む時間帯）を先に見つける」ための部分です。

■ このあとの見込み


今のHPから、基礎消費と残りの服薬だけを織り込んだ予測カーブです。下に沈むところが「谷」＝体力が不足しやすい時間帯。服薬のタイミングで持ち上がり、時間とともに下がります。谷が来る前に休む・服薬を合わせる、といった判断の材料になります。



このあとの見込み：下に沈むところが谷（要セーブの時間帯）

■ 健常者のコルチゾール日内変動（参考）

健康な人のコルチゾールは、朝8時ごろにピークを迎え、日中はゆるやかに下降し、深夜0～2時が最低——という自然なリズムを描きます。自分の服薬カーブをこの形に近づけられると理想的で、服薬タイミングを調整する目安になります。

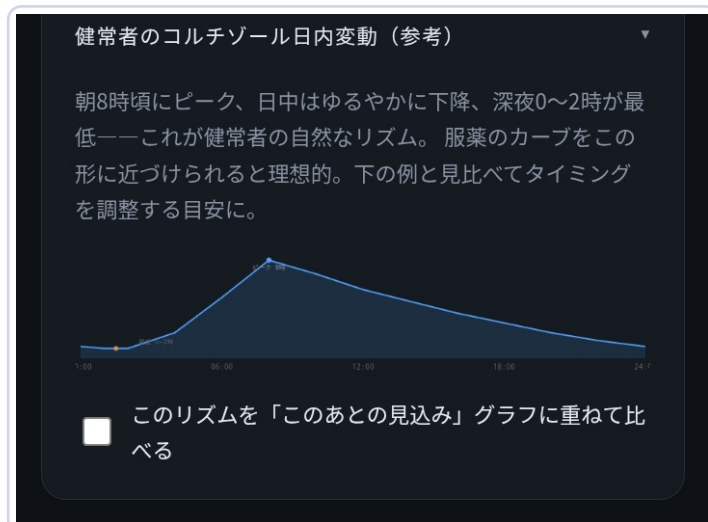


健常者の日内変動（参考）：朝ピーク→日中ゆるやかに下降→深夜が最低

2つを重ねて比べる

「このリズムを『このあとの見込み』グラフに重ねて比べる」にチェックを入れると、自分の予測カーブと健常者リズムを重ねて表示でき、ズレ（谷の深さ・タイミング）が一目で分かります。

3. メモ —— 天候・出来事・症状を時刻付きで記録

気圧や天候、ストレスになった出来事、症状の変化などを書き留めておけます。入力して「+記録」を押すと、自動で時刻が付いて一覧に残ります。受診時の説明材料になります。

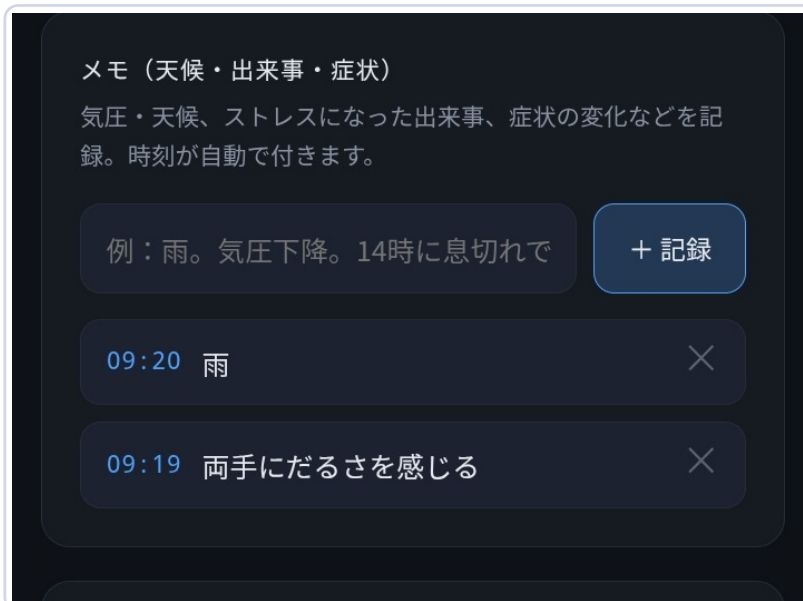


メモ欄：入力して「+記録」。時刻付きで新しい順に並び、×で個別削除できます

- 記録した内容はその日のログに含まれ、ログ履歴にも一緒に保存されます。
- 例：「雨。気圧下降。14時に息切れで座り込み」のように、状況と症状をセットで残すと後で振り返りやすくなります。


4. 今日のしんどさ（シックデイ負荷）スライダー

悪天候・発熱・出血・強いストレスなどで負荷が高い日は、このスライダーを上げます。上げるとタスクの消費が重くなり、その日に必要な「追加コートリル量の目安」が +〇mg で表示されます（上限＝平常の3倍＝シックデイ最大）。

誤操作を防ぐため、スライダーは通常ロックされています。「タップで調整」ボタンを押すと調整でき、もう一度押すと固定されます。

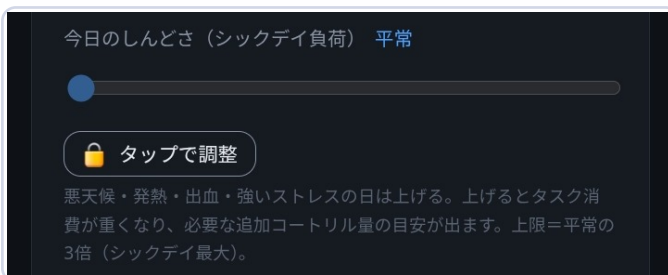

平常時（ロック中）

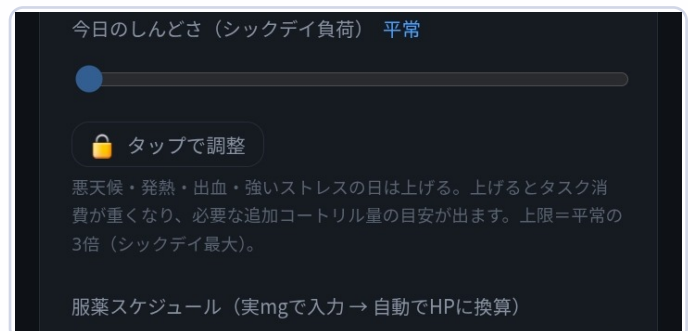


調整中：+約10mg（本日 約30mg 相当）と表示

使い方の目安

スライダーの位置がそのまま「今日はこれくらい増やす場面」という感覚の目安になります。実際の増量の可否・量は、この表示を材料に主治医と相談してください。


5. やること（タスク）—— こなしたらタップして消費

「やること」は、日々の活動をカードにしたものです。ある活動をこなしたら、そのカードをタップします。タップすると、その活動のぶんだけHP（体力）が減り（＝消費）、右上の回数が1つ増えます。赤いカードは、コルチゾールが急に必要になりやすい負担の大きい活動です。

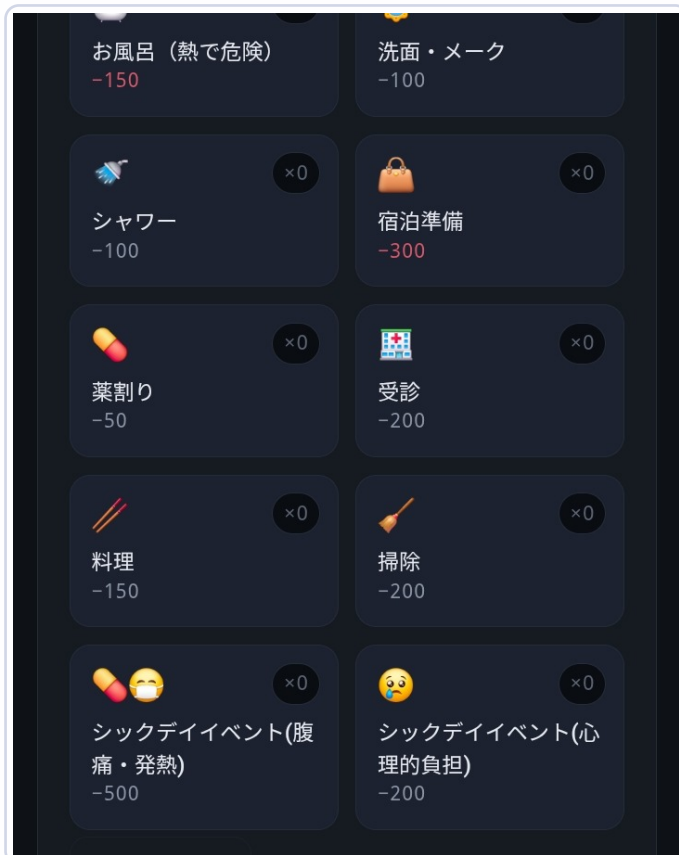

やること（タスク）カードの例。こなしたらタップ→HPを消費。赤字＝負担の大きい活動

カード一覧の下には、操作と記録用のボタンが並びます。

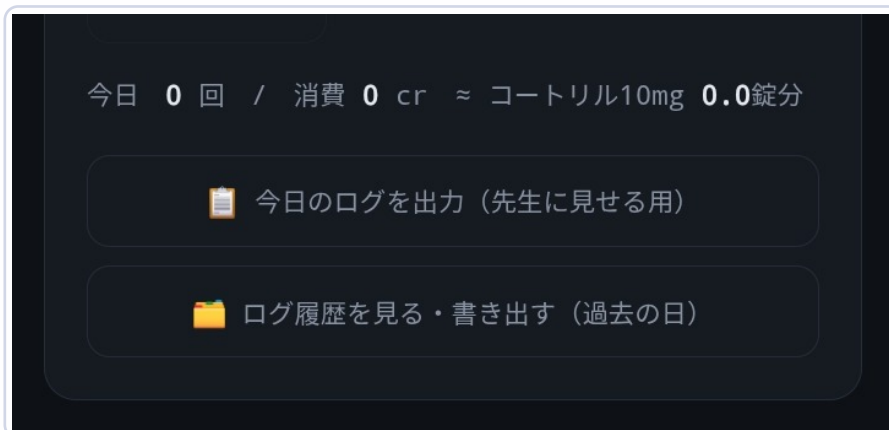

タスク下部：ひとつ戻す／今日のログを出力／ログ履歴を見る・書き出す

- ひとつ戻す：直前のタップ（タスク実行や服薬）を1つ取り消します。
- 今日のログを出力：その日の服薬・消費・収支・メモをまとめてテキスト表示（先生に見せる用）。
- ログ履歴を見る・書き出す：過去に自動保存された日のログをまとめて表示・コピーできます。

■ タスクを編集・追加

「タスクを編集・追加」を開くと、項目名・絵文字・コスト（消費量）・赤（危険）の有無を自由に編集できます。自分の体感に合わせて、コストを増減したり、よく行う活動を新しいタスクとして追加したりできます。




タスクを編集・追加：コスト・危険（赤）を自分の体感に合わせて調整

下部の「+タスクを追加」で新しいタスクを作成

- コスト：その活動で消費するHP。大きいほど負担が重い活動として扱われます。
- 危険（赤）：チェックすると赤カードになり、「コルチゾールが急に要る負担の大きい活動」として目立ちます。
- +タスクを追加：自分の生活に合わせて、新しい活動カードを増やせます。

6. ログの出力と履歴

「新しい日（リセット）」や午前4時の自動切替のたびに、その日のログが自動で履歴に保存されます。履歴は約120日分まで保持されます。

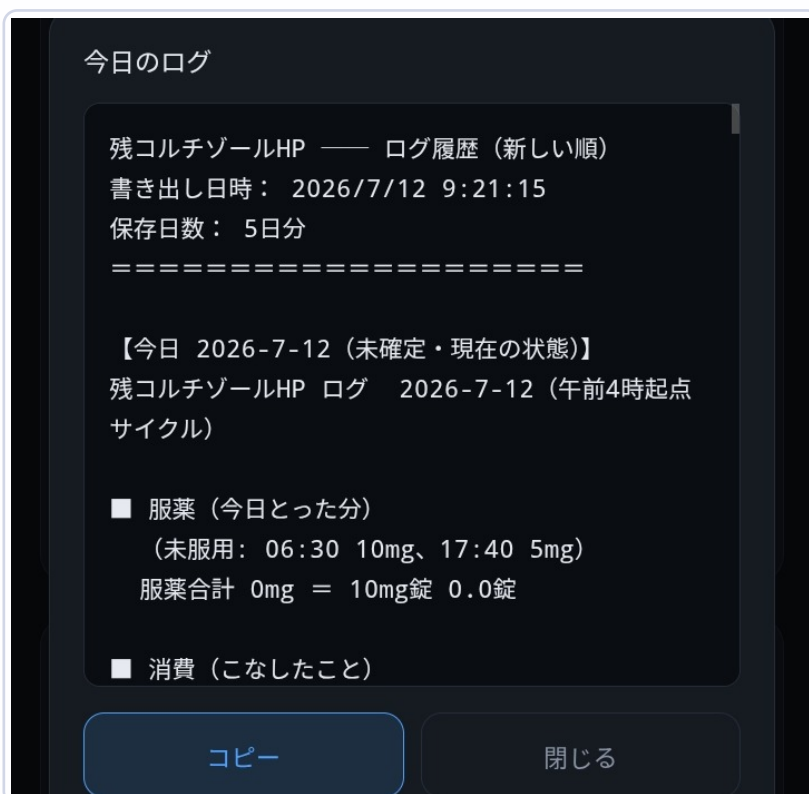

ログ履歴：今日分＋過去の保存日が新しい順にまとまって表示され、そのままコピーできます

7. 設定（個人差）

体質・服薬は人によって違うため、自分の値に合わせて調整します。数値は $50\text{cr} = 1\text{mg}$ 換算（例： $10\text{mg} \rightarrow 500$ ）で、コルチゾール値を連想しやすいスケールにしています。

設定（個人差）

体質・服薬は人によって違う。自分の値に合わせて。

最大HP（コルチゾール上限） 開始HP（朝の初期値）

1200 cr 277 cr

基礎消費（生きてるだけで減る量・1日）

500 cr / 日

= 約 20.8 cr/時間 / mg換算 約 10.0 mg/日

今日のしんどさ（シックデイ負荷） 平常

タップで調整

悪天候・発熱・出血・強いストレスの日は上げる。上げるとタスク消費が重くなり、必要な追加コートリル量の目安が出ます。上限＝平常の3倍（シックデイ最大）。

服薬スケジュール（実mgで入力→自動でHPに換算）

番号	時刻	量	mg換算	操作
1	6:30	10	mg = 500	×
2	17:40	5	mg = 250	×


+ 服薬を追加

設定画面：最大HP・開始HP・基礎消費・しんどさスライダー・服薬スケジュール

- 最大HP／開始HP：1日の上限と、朝の出だしの値。開始HPは天候プリセットでも切り替わります。
- 基礎消費：生きているだけで減る量（1日）。mg換算の目安も表示されます。
- 服薬スケジュール：実mgで入力すると、自動でHP回復量に換算されます。

8. データ引き継ぎ・バックアップ

設定・タスク・服薬・メモ・ログ履歴を、まとめて書き出し／読み込みできます。端末を変えるときや、万一に備えたバックアップに使います。

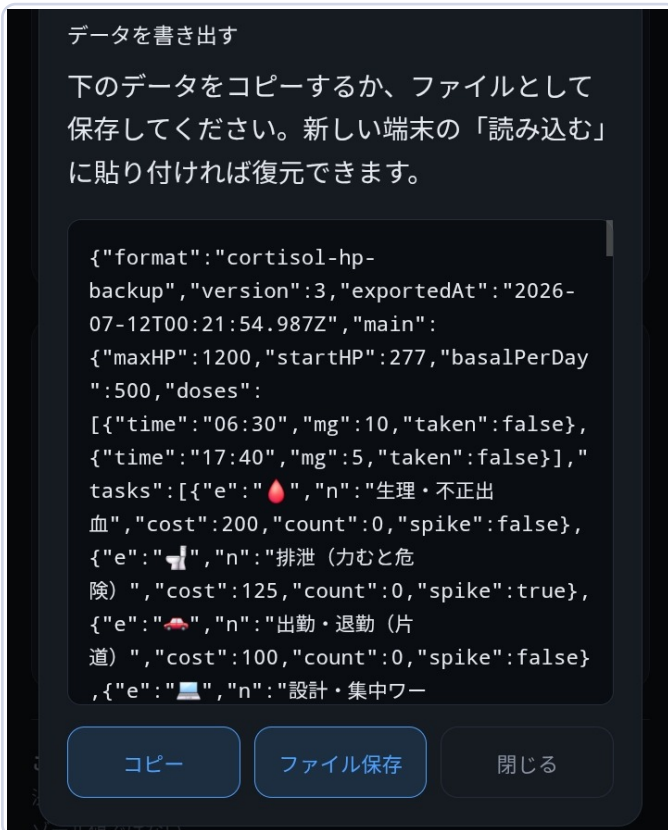

書き出す：コピー／ファイル保存



読み込む：貼り付け／ファイルから読む

引き継ぎの手順（2ステップ）

- ① 旧端末で「書き出す」→ コピー、またはファイル保存。
 - ② 新端末でアプリ（HTML）を開き「読み込む」→ 貼り付け、またはファイルから読む → 復元する。
- ※「復元する」を押すと、その端末の現在のデータは上書きされます。

補足：アプリ本体（cortisol_pacing.html）とデータは別物です。新端末にはまずアプリ本体をコピーしてから、データを読み込んでください。詳しい手順は巻末の付録を参照してください。

付録 端末の引き継ぎ・バックアップ手順

データの書き出し／読み込みの詳しい手順

このアプリの記録は、使っている端末（ブラウザ）の中だけに保存されます。別の端末で続きを記録したいときや、万一に備えてバックアップを残したいときは、「データ引き継ぎ・バックアップ」機能を使ってデータを移します。

含まれるデータ（すべて一度に移せます）

- ・設定（最大HP・開始HP・基礎消費・服薬スケジュール）
- ・タスク一覧とコスト ・今日の記録 ・メモ ・過去のログ履歴

A. 旧端末で「書き出す」

- ① 設定画面の下にある「データ引き継ぎ・バックアップ」を開きます。
 - ② 「書き出す（コピー／保存）」ボタンを押します。
 - ③ 表示されたデータを、次のどちらかの方法で保存します。
 - ・「コピー」を押す → メール・メモアプリ・クラウドメモなどに貼り付けて保存。
 - ・「ファイル保存」を押す → バックアップファイル（.json）が端末に保存されます。
- ※ どちらか一方でかまいません。ファイル保存のほうが、あとで貼り付けミスがなく確実です。

B. 新端末で「読み込む」

- ① 新しい端末で、このアプリ（cortisol_pacing.html）を開きます。
- ② 「データ引き継ぎ・バックアップ」で「読み込む（貼り付け）」ボタンを押します。
- ③ 旧端末で保存したデータを用意します。
 - ・コピーで保存した場合 → 入力欄に貼り付け。
 - ・ファイルで保存した場合 → 「ファイルから読む」を押してバックアップファイルを選択。
- ④ 「復元する」を押します。確認が出たら「OK」。画面が自動で再読み込みされ、引き継ぎ完了です。

注意

「復元する」を押すと、その端末の現在のデータは上書きされます。
新しい端末や、まだ記録していない端末で読み込むぶんには問題ありません。

よくある質問

Q. アプリ（HTMLファイル）そのものは、どうやって新端末に移すの？

A. cortisol_pacing.html のファイルを、メール添付・クラウド（Googleドライブ等）・USBなどで新端末にコピーし、ブラウザで開いてください。アプリ本体とデータは別物なので、『ファイル（アプリ）を移す』→『データを読み込む』の2ステップになります。

Q. iPhone から Android（またはその逆）でも移せる？

A. 移せます。データは文字（テキスト）なので端末の種類を問いません。コピー方式なら確実です。

Q. どのくらいの頻度でバックアップすればいい？

A. 受診の前や、大きな体調変化を記録したあとなど、区切りのよいときに書き出して保存しておくで安心です。ログ履歴は約120日分まで自動保持されますが、端末の故障・買い替え・ブラウザのデータ消去には自動では備えられないため、ときどき手動で書き出すことをおすすめします。

Q. 同じ端末で使い続ける場合は、何もしなくていい？

A. はい。日々の記録・履歴は自動で端末内に保存され、午前4時に日付が切り替わる際もその日のぶんが履歴に自動保存されます。バックアップは「念のため」の備えです。

Q. 書き出したデータの中身は読める？個人情報？

A. 中身はこのアプリ用の設定・記録データです。氏名などの個人情報は含みません。ただしメモに書いた内容はそのまま含まれるので、共有・保管場所にはご注意ください。

困ったときの合言葉

『アプリ（HTML）を移す』→『データを読み込む』。この2つで引き継ぎ完了。